

HEGA-Medical

Technologia czyszczenia w praktyce medycznej, laboratoriach i zastosowaniu szpitalnym



Pistolety **HEGA** do przepłukiwania stosowane w praktyce medycznej, laboratoriach i w praktyce szpitalnej.

Opracowane na bazie doświadczeń firmy HEGA pistolety do czyszczenia gwarantują dokładne wyczyszczenie wraz z ich bezpieczną i łatwą obsługą. Wszędzie tam gdzie niezbędne jest dokładne wyczyszczenie sprzętu laboratoryjnego, endoskopów, pipet, strzykawk, kaniul, kuwet lub innych wyrobów stosowanych w praktyce laboratoryjnej lub klinicznej zastosowanie pistoletów do przepłukiwania i mycia z firmy HEGA jest najlepszym rozwiązaniem.

Nova 7050



Pistolety do przepłukiwania HEGA dzięki dobremu dozowaniu zapewniają wyśmienite rezultaty czyszczenia niezależnie od tego czy proces odbywa się z użyciem wody czy sprężonego powietrza. Poprzez zastosowanie różnego rodzaju końcówek, które wystarczy wyłącznie podłączyć można dotrzeć do najdalszych miejsc mytych wyrobów. Pistolety do przepłukiwania HEGA Dina oraz Nova zostały zaprojektowane i przebadane praktycznie pod kątem bezpieczeństwa. Ich zakończenie zapewniają mocne trzymanie dodatkowych końcówek a standardowe wyposażenie umożliwia bezpieczne i higieniczne mocowania na ścianie lub w stole.

HEGA - Zestaw Profi 5220

5030 Strumieniowa pompa wodna do zasysania płynów

5020 Końcówka do mycia butelek i pojemników
Erlenmeyer

4620 Końcówka Luer do strzykawek i kaniul ze
stożkową końcówką

5010 Końcówka do pipet pomiarowych i krwi

4270 Końcówka Record do igieł i kaniul z końcówką record

4240 Końcówka do czyszczenia rur do drenażu

4230 Końcówka do czyszczenia kateterów i zaworów



Dina 6010

HEGA - Zestaw Profi



5060 Strumieniowa pompa wodna do zasysania płynów

5050 Oprzyrządowanie do mycia zakrzywionych rur, długość
230 mm

5100 Okrągła szczotka, średnica 54 mm, wysokość 30 mm

5090 Szczotka U, średnica 40 mm, długość 130 mm

5080 Szczotka w kształcie różki, średnica 12 mm, długość
134 mm

HEGA - Pistolety do mycia



- Wstępnie nastawiamy przepływ
- Regulowany płynnie rozpylany strumień od pełnego do rozproszonego strumienia
- Ergonomicznie uformowana gumowa rączka z mechanizmem blokującym
- Zawiera obejmę w kształcie stożka do mocowania w stole lub na ścianie
- Zawiera 1,5 m wąż z PVC
- Zawiera zestaw podłączeniowy do wody $\frac{1}{2}$ " lub $\frac{3}{4}$ "



8010 Rola pistolet do mycia z funkcją natrysku

- 10 różnych wymiennych końcówek
- Ergonomicznie uformowana gumowa rączka z mechanizmem blokującym
- Zawiera obejmę w kształcie stożka do mocowania w stole lub na ścianie
- Zawiera 1,5 m wąż z PVC
- Zawiera zestaw podłączeniowy do wody $\frac{1}{2}$ " lub $\frac{3}{4}$ "

3000 Zestaw ścienny wykonany z plastiku, bezpiecznie mocowany do ściany jedynie 2 wkrętami



5070 Zestaw do stołu do montowania w dowolnym stole roboczym




HEGA-Medical

Pistolet do mycia ze stali nierdzewnej z wymiennymi końcówkami

Hela-zestaw do mycia 9050

Pistolet ze stali nierdzewnej wraz z zestawem 6 wymiennych końcówek. Zestaw został zaprojektowany w sposób umożliwiający podłączenie go do wody demineralizowanej. Pistolet można łatwo rozmontować na części bez konieczności stosowania jakichkolwiek narzędzi dzięki czemu jego czyszczenie jest bardzo łatwe. Zastosowanie wysokiej jakości materiałów w połączeniu z ostatnią myślą techniczną w pełni umożliwia sterylizację parową pistoletu. Ergonomiczna praca z pistoletem jest możliwa zarówno przy wysokich ciśnieniach jak również w szerokim zakresie temperatur.

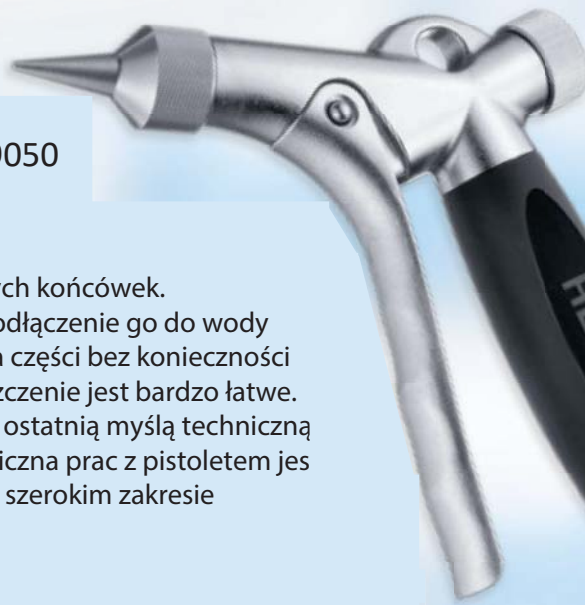

1150 Przyłącze do mocowania węża z PVC lub ze stali nierdzewnej

1040 Szpiczaste przyłącze do czyszczenia zaworów

1120 Złącze Luer dla strzykawek i kaniul z podłączeniem typu Luer

1125 Końcówka Record dla strzykawek i kaniul ze stożkową końcówką record

1130 Końcówka do czyszczenia drenów

5055 Dysza rozpylająca do czyszczenia szkła oraz powierzchni



Uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej do mocowania przy stole ze stali nierdzewnej bez potrzeby mocowania na ścianie.

Hela-zestaw do mycia 9050

Zaprojektowany do stosowania z wodą demineralizowaną, demontowalny bez konieczności użycia narzędzi, autoklawowalny.



Cały pistolet można łatwo rozmontować na części bez konieczności stosowania jakichkolwiek narzędzi. Wąż podłączony do pistoletu można łatwo odłączyć poprzez odkręcenie nakrętki stożkowej. Po jej zdjęciu łatwo jest wyjąć z pistoletu stabilny termicznie uchwyt. Po odkręceniu zamykającej zakrętki można wyjąć całą jednostkę dozującą. Podobnie jak pistolety Dina i Nova pistolet Hela posiada stożkową końcówkę zainstalowaną na końcu uchwytu umożliwiającą czyste i bezpieczne magazynowanie w połączeniu z możliwością mocowania do stołu (5070) lub ściany (3000).