
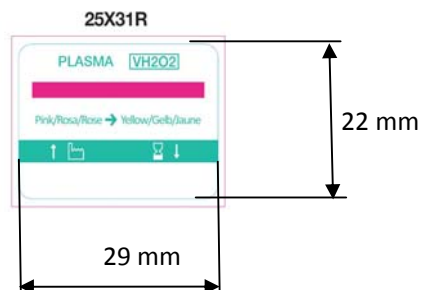
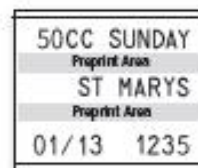


• Metkownica trzyczędowa MET3.W

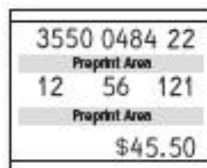

Metkownica alfanumeryczna trzyczędowa umożliwiająca:

- zapis informacji przy pomocy 12 cyfr /znaków w każdym z trzech rzędów;
- drukowanie tych informacji na etykietach o wymiarach nieprzekraczających 22 mm x 29 mm;
- naklejanie zadrukowanych etykiet na pakietach lub pojedynczych torebkach.

Drukowanie etykiet w trzech rzędach **wzdłuż** kierunku rozwijania/przesuwu taśmy.

W zależności od zastosowanych taśm etykiety mogą być również podwójnie samoprzylepne.

Szerokość taśmy właściwej dla tej metkownicy – 25 mm, skok metkownicy 31 mm.

Wałki barwiące do metkownicy – Rolka3/3.W

• Etykiety podwójnie samoprzylepne

w rolkach po 750 etykiet nawiniętych na plastikowe gilzy;

odpowiednie do metkownic trzyczędowych drukujących wzdłuż przesuwu taśmy z etykietami,

- ETY3PARA.W – wskaźnik sterylizacji parowej zmienia barwę na kolor ciemny brąz /czarny;
- ETY3EO.W - wskaźnik sterylizacji tlenkiem etylenu zmienia barwę na kolor zielony;
- ETY3PLAZMA.W – wskaźnik sterylizacji plazmowej zmienia barwę na kolor żółty;
- ETY3.W – bez wskaźnika sterylizacji.

Opakowanie zbiorcze transportowe 12 rolek + wałek barwiący do metkownicy

Rev. 02.2016

Sterigat Sp. z o.o.

ul. Zaściankowa 50/1, 02-989 Warszawa
Biurowo handlowe:
 ul. Bukowiecka 92 lok. 23, 03-893 Warszawa
 Tel.: +48 22 3797160
 Fax: +48 22 3797161
 e-mail: sterigat@sterigat.pl • www.sterigat.pl

NIP: 951 229 59 60 • REGON: 142051830
 konto: 42 2490 0005 0000 4520 4746 2236
 KRS: 0000338923
 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
 XIII Wydział Gospodarczy KRS
 Kapitał zakładowy 5000 PLN, wpłacony w całości