

STERIGAT

NINJO


NAJWYŻSZA TECHNOLOGIA MYCIA I DEZYNFEKcji

Myjnie dezynfektory linii Ninjo (dawna nazwa FD1600) są przeznaczone do opróżniania, mycia i dezynfekcji kaczek i basenów w oddziałach szpitalnych i innych placówkach.

Front obudowy wykonano z wysokiej jakości kompozytów, a boki ze stali nierdzewnej. Komora może być wykonana z wysokiej jakości kompozytów lub ze stali nierdzewnej w zależności od modelu.

Bardzo zabrudzone naczynia są najpierw płukane przez dwie dysze obrotowe i dziewięć dysz statycznych.

Wypłukane naczynia są następnie dezynfekowane przez te same dysze, rozprawdzające parę bezpośrednio na każde naczynie. Zawsze zapewniona jest dezynfekcja wnętrza każdego naczynia, a i sama myjnia - komora, orurowanie, dysze, itd. – jest również dezynfekowana w każdym procesie, dzięki systemowi PSD (Pipe System Disinfection czyli System Dezynfekcji Orurowania).

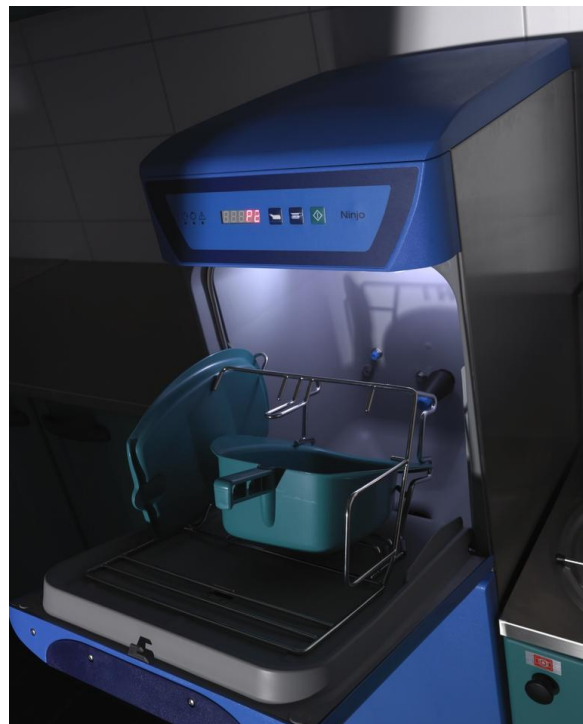

Oba modele dostępne są w dwóch wysokościach:

- 1320 mm - w dolnej części myjni jest miejsce na środki chemiczne: środek zmniejszający napięcie powierzchniowe wody oraz detergent;
- 870 mm - w wersji pod blat pokrywa górna wykonana jest ze stali nierdzewnej.

Szerokość obu modeli to tylko 450 mm, a głębokość - 580 mm.

Myjnie spełniają wymagania normy PN-EN ISO 15883.



AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR:

STERIGAT Sp. z o.o.

02-989 Warszawa, ul. Zaściankowa 50,

www.sterigat.pl e-mail: sterigat@sterigat.pl tel. 22 3797160 fax. 22 3797 161

Biuro Handlowe: 03-893 Warszawa u. Bukowiecka 92 lok.23